

ファーストアイス

- どこでもフィットするフレキシブルアイシング
- 患部に密着するコンプレッションアイシング
- 軽く柔らかく身体になじむ快適アイシング
- 自然氷のクラッシュアイスアイシング
- 過冷でないナチュラルアイシング
- 冷却時間の長い継続アイシング
- 扱いやすいイージーアイシング
- 最適ローコストアイシング



継続的冷却療法

(Continuous Cold Therapy)とは
4℃～15℃の冷熱を長時間に亘り、

患部に適用する療法と定義されてい
ます。ファーストアイスはこのために

開発されたクラッシュアイスです。

継続的冷却療法には氷が適していると

言われています。ファーストアイスは、

氷と同等の冷却効果を有しながら氷より

寒冷維持時間が長く・扱い易く・軽く・

柔らかく・クラッシュアイスなので患部への
フィット性に優れています。

ファーストアイスバック

凍ると
クラッシュアイス




冷凍前は
透き通ったゼリー

クラッシュ状態



施療中のパック温度比較

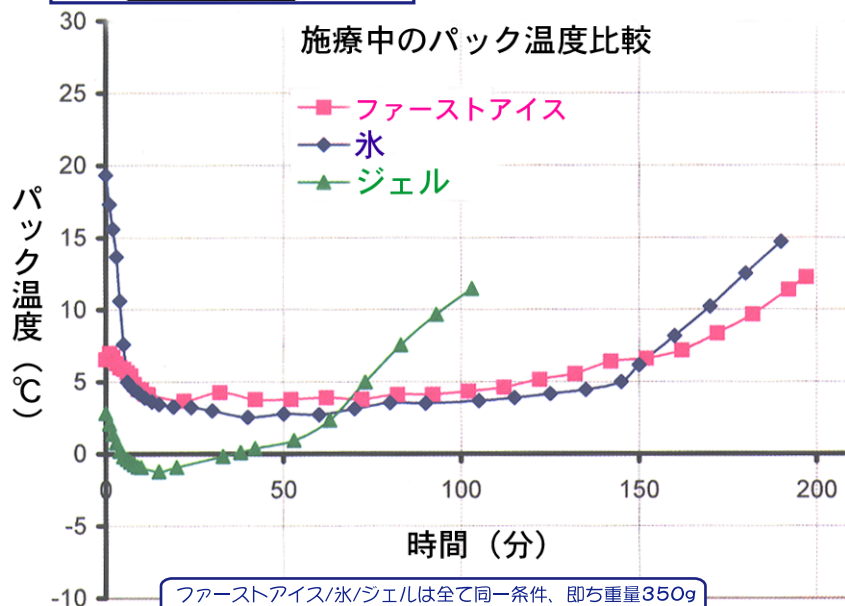

ファーストアイス/氷/ジェルは全て同一条件、即ち重量350g
の試料を15cmx 25cmのビニール製のバックに収容し-25℃
に冷凍した。なお氷はこの種の用途に合わせて砕いてある。

販売取扱

使用法:

- パックは冷凍庫内に平らに置き数時間冷凍する。
- 冷凍庫から取り出したら、パックをほぐすとクラッシュ状のアイスがより柔らかくなる。
- 患部に当てる。

(注: パックを肌に直接当てる時はパックをタオル等で包んでから使用する。)

- 3-4時間経過、或いはパックが溶けて冷たなくなったら新しいパックと交換する。
- 継続冷却総時間は専門家の指示に従う。

開発製造:
トランテクノロジー社
米国・フロリダ州



輸入総発売:

アコードインターナショナル株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4-1005
TEL:03-3299-6751 FAX:03-3299-6752
e-mail: Accord@accord-intl.com http://www.Accord-INTL.com